

P・A CONNECTOR


P・A コネクター

手軽に気軽にアタッチメント


PAコネクター 歯科用パターン成型品
届出番号 08B3X00007000030




根面板+オーバーデンチャー

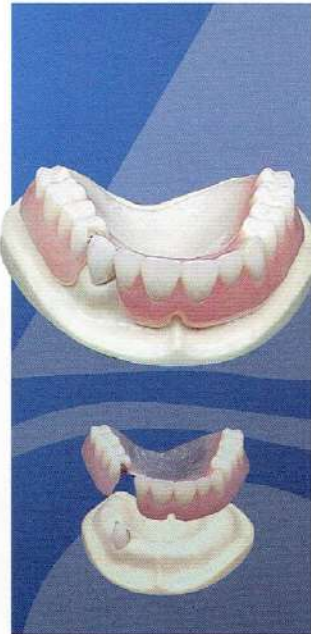

一歯残存

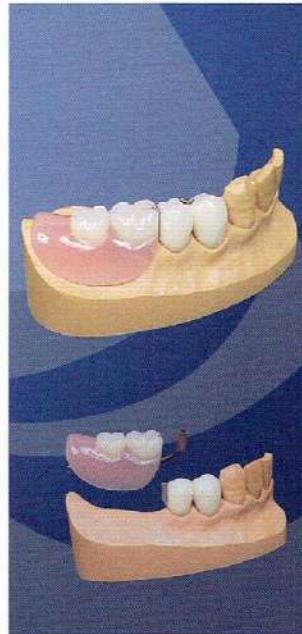

一床2歯舌側片側処理

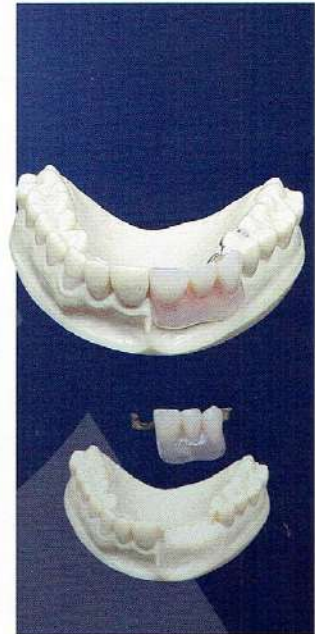

中間欠損審美義歯

特長

- P・A コネクターは、クラウンブリッジからデンチャーワークまで幅広くお使い戴ける連結具としてのアタッチメントです。
- 他の製品と違って、25ミリのロングサイズのパターンから歯冠長に合わせて切断して使うよう設計されているため、大変経済的です。
- 約100度で溶融する樹脂で造られているため、埋没材を選びません。勿論、焼却残渣は残りません。
- トラックタイプは、O・P・Aインテグラシステムのパッシブトラックとして活用するばかりでなく、連結具として幅広くお使い戴けます。
- レールテーパーは大臼歯部から前歯部まで利用できるようテーパーがついており、適切なサイズの部分を選択カットしてお使い戴くよう設計されています。
- 用途制限は有りません。必要とする箇所にスペースが有れば何処にでも意のままに使えます。近遠心方向ばかりでなく、頬舌方向に使用することも可能です。
- 義歯、クラウンブリッジの設計にP・Aコネクターの選択肢が加わることで、自由度が広がります。O・P・Aインテグラシステムの手法をとれば、審美性を満たした義歯の設計は、シンプルに簡単に実現することが可能です。

●実技研修会を各地で実施いたしております。御要望があればご一報ください。

名称	断面形態	用途
トラックNo,1.5		O・P・Aインテグラシステム, Key & Key Way
トラックNo,2.0		O・P・Aインテグラシステム, Key & Key Way
レールテーパー		Key & Key Way, 補助維持装置

●アソート (各4本) 12本入 ●各々単品12本入◎ ¥4,300



プラスチックパターン
先端の○△等のフラッグは識別のため



鋳造体・レールテーパーは、サイズの違いを表すため2点で示している。



発売元
チョーワ株式会社
〒316-0002 茨城県日立市桜川町 3-9-10
TEL 0294-32-2581 FAX 0294-32-2583

製造販売許可番号 08B3X00007
製造業許可番号 08BZ000172
<http://chowa.watson.jp/index.html>